


GG-240 (P5 (病毒检测) 自动液体灌装机

产 品 简 介



一产品实拍图

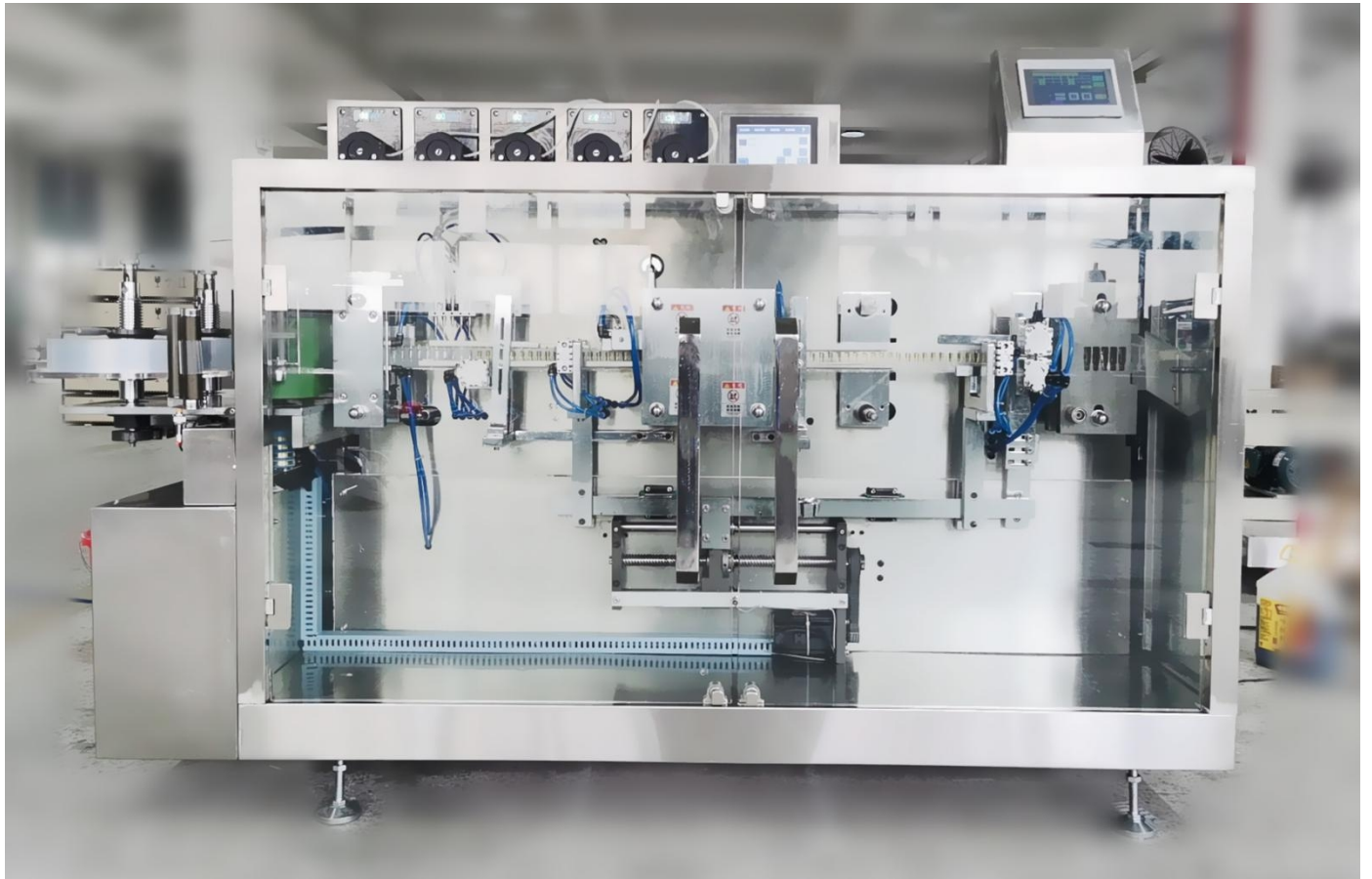

二.包装产品样式

样品展示
13



我们能做什么？

Automatic-Filling & Sealing Machine for Oral Liquid Plastic Bottle
口服液塑料瓶自动成型灌装封机

样品展示



按样定制
满足用户需求

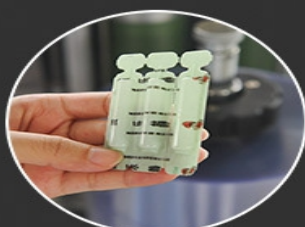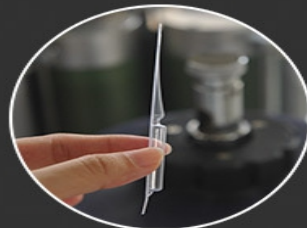


三.产品细节图:




产品计量灌装机构




往复式产品热封机构密封性能更好

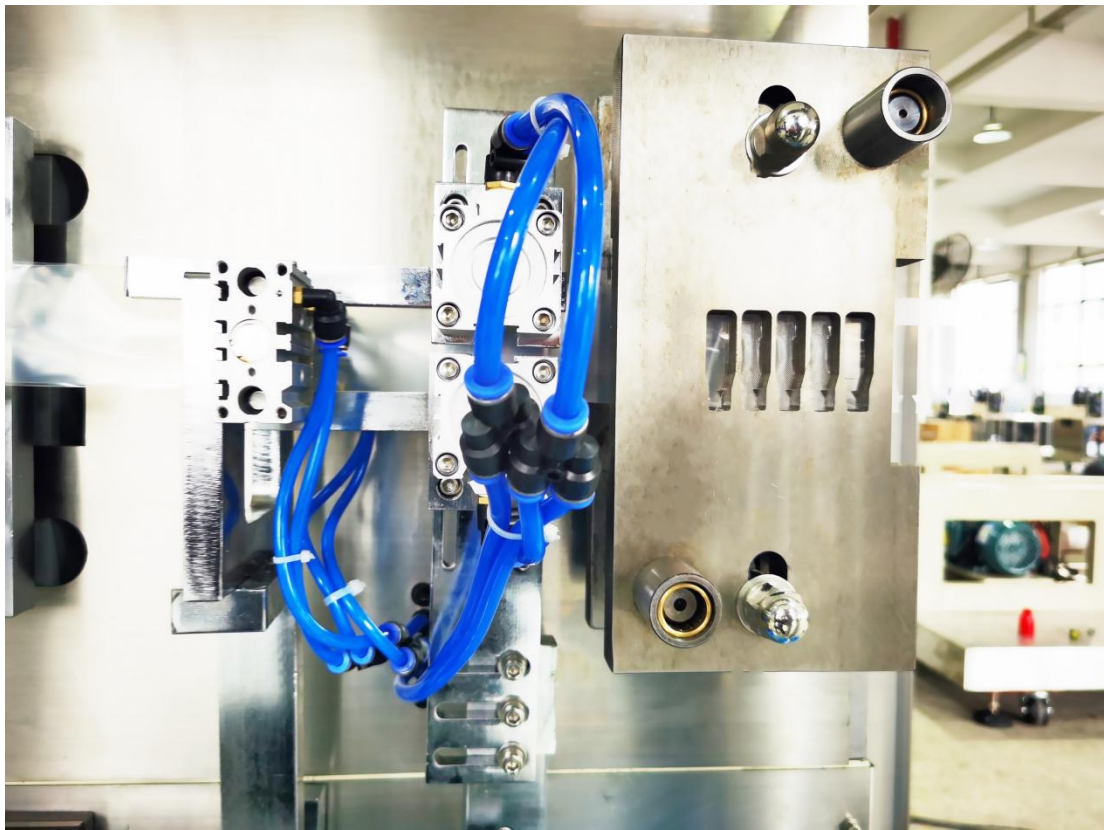

多列产品模切出料机构 速度更快

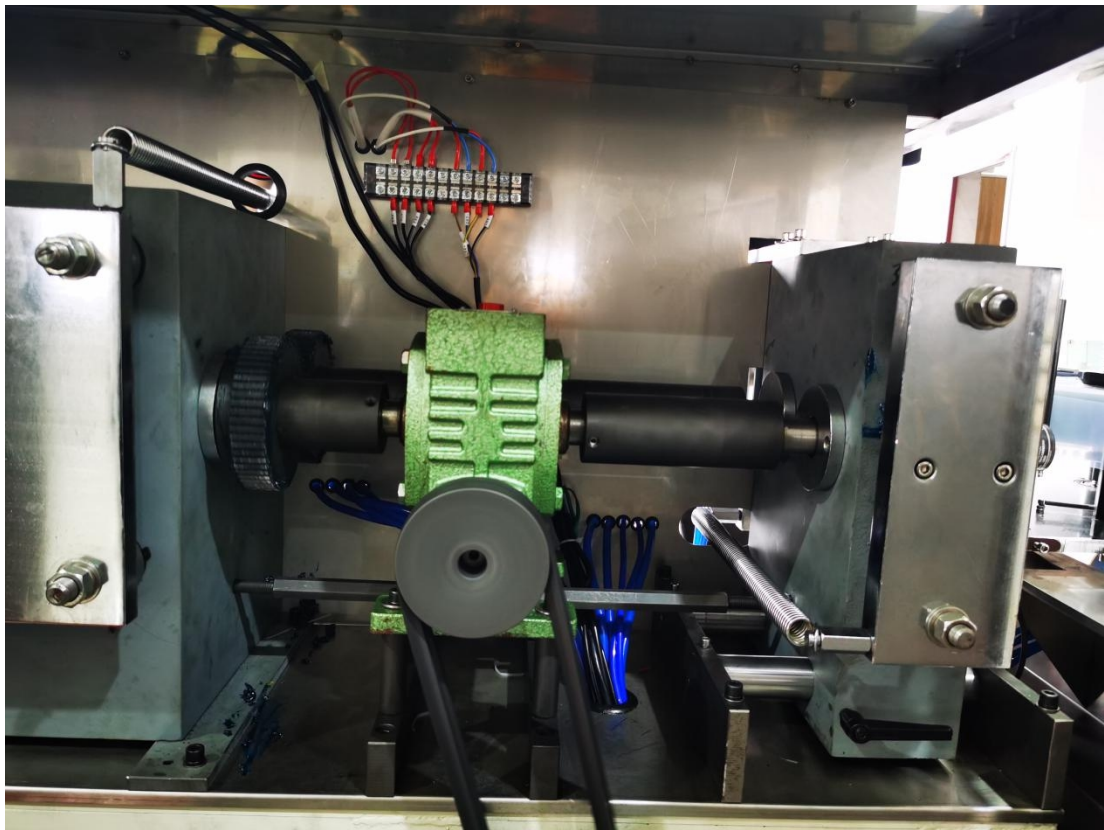

产品驱动机构

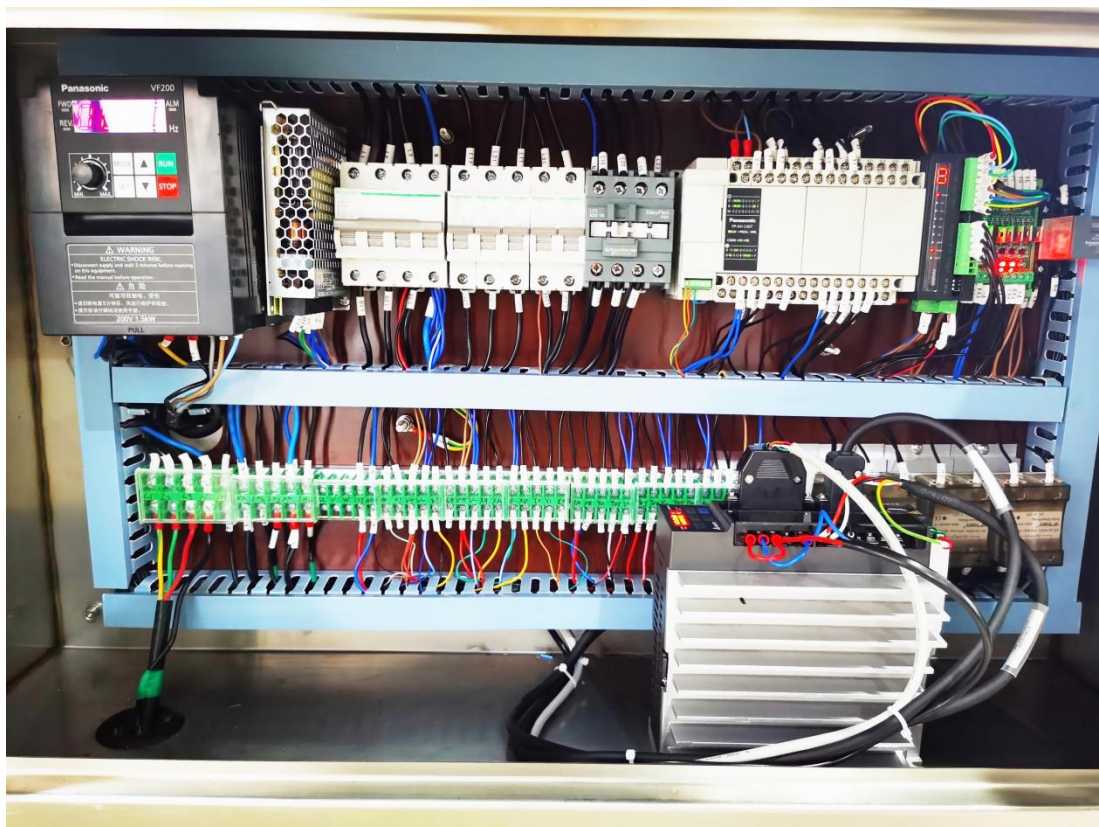


原装进口电器松下控制系统



触摸式控制界面 故障显示一目了然



可调式挂膜机构调节方便 适用多种规格

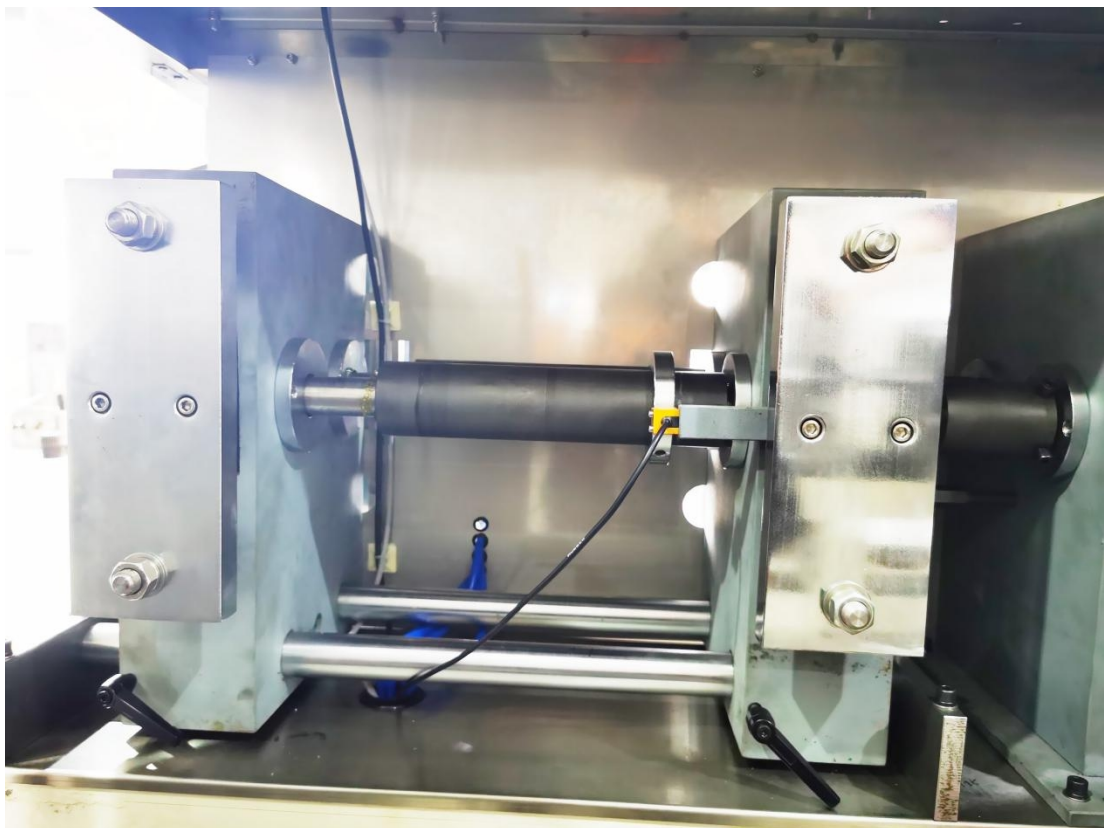

直通式驱动 维修调节更方便

四.设备配置清单

组件列表				
名字	品牌	数量	型号	产地
触摸屏	Weinview	1	6070IQ	Taiwan
PLC	FATEK	1	FBS-40MAT	Taiwan
加热模块	Huibang	1	ST-100	China Jiangshu
断路器	Schneider	1	4P/40A	France
断路器	Schneider	5	1P/15A	France
微型继电器	CHINT	2	DC24V/2P	China
开关	Mingwei	1	24V/100W	Taiwan
黑色终端	Schneider	1	2.5/4	France
绿色终端	CHINT	6	1.25/5	China
绿色终端	CHINT	1	2.25/5	China
固体继电器	Schneider	4	25DA	France
散热器	Schneider	4		France
编码器	OMRON	1	DC24V/360P	Japan
停止按钮	Schneider	1		France
热电偶	CHINT	4	K Type	China
变频器	Pioneer	1	1.5Kw	China
电机	Fangda	1	1.5Kw	China

五.产品应用:

本机主要用于新冠病毒检测分析液灌装 塑胶吸塑检测试剂灌装 乳液及护理液、口服液、洗涤剂、洗眼剂、营养液、饮料、食用油、润滑油、农药、医药、香料、化工及特殊液体灌装。该机自动化程度高，运行稳定，产量高，质量好，价格低，受到了广泛的认可和推崇。

六.产品特性:

1. 由可编程控制器控制，变频无级变速。
2. 从展开辊、AMP 瓶成型、灌装、密封、打印序列号、切割末端、切割零件的所有过程都由程序控制。
3. 电脑人机界面操作简单明了。
4. 灌装头不会掉落、泄漏、冒泡和溢出。
5. 全部采用优质不锈钢制成，符合 GMP 标准。
6. 气动元件和电器多采用国外品牌。
7. 自动和机械灌装，精确计算和有限的偏转

七.报价:

1. 报价:宁波港离岸价 180000RMB(随机提供一套模具) 额外模具:18000RMB
2. 付款:30%电汇预付款，70%装船前电汇至卖方银行账户。
3. 有效期:30 天
4. 包装尺寸:包装后 1.9 立方厘米
5. 交货时间:15-20 天内收到你的 30%的预付款。
6. 保证时间:一年保修，终身服务。

7. 包装和标记: 包装:木箱 运输标志:由用户选择决定。
8. 安装和调整:如果需要, 卖方将派遣技术人员到你的国家进行安装、调试、调整机器和培训工人。然而, 买方应承担我们的技术人员在买方国家停留期间所需的所有费用, 包括签证、机票、住宿、食品和自付费, 以及技术人员每天 80 美元的每日津贴。
- 9.** 上述机器设计用于三相电源, 380 伏/50HZ 或 220 伏/50hz/1P。 10. 报价自上述日期起 60 天内有效, 随后需重新确认。

八.基本参数:

成型深度(最大值)	24mm
填充速度	100 Bottle/min
灌装头	5
包装材料	PET/PE PVC/PE (0.2-0.5) × 240mm
填充体积	1-100ml/piece
功率	8.5 kw
电压	220V/380V 50/60HZ 3phase
重量	1200kg
体积	3200×850×2000 (mm)

